

Restauración y Prótesis



Fiable,
eficiente,
precisa:
Alegra.



Turbinas

alegra

TRIPLE SPRAY

para la refrigeración óptima del lugar de tratamiento desde todos los lados.

CABEZAL REDUCIDO

para una visibilidad óptima del lugar de tratamiento.

POSICIÓN ÓPTIMA DEL LED

para mejor visión e iluminación del lugar de tratamiento.

BOTÓN DE PRESIÓN-SISTEMA DE SUJECIÓN

para un cambio de fresa rápido y sencillo sin apenas ejercer fuerza.

TORQUE ELEVADO

para un tratamiento rápido y eficiente.

RODAMIENTO CON BOLAS CERÁMICAS

para una vida útil más larga y un funcionamiento extremadamente silencioso.

FABRICADOS CON PRECISIÓN

para un funcionamiento sin vibraciones y silencioso.

FILTRO DE AGUA

para una óptima función de spray.

INNOVADOR SISTEMA DE GENERADOR

en el acoplamiento Roto Quick para el uso de turbinas con luz Alegria.




Una vida útil más larga y un funcionamiento extremadamente silencioso

Descubra las nuevas turbinas Alegria extremadamente silenciosas para el uso diario en su consulta. Han sido diseñadas con los últimos avances tecnológicos para cumplir todas sus necesidades. Made in Austria: para lograr sus mejores resultados de tratamiento.



Vida útil excepcional

Los rodamientos con bolas cerámicas garantizan el mínimo desgaste. ¡Especialmente en el caso de un mantenimiento óptimo!

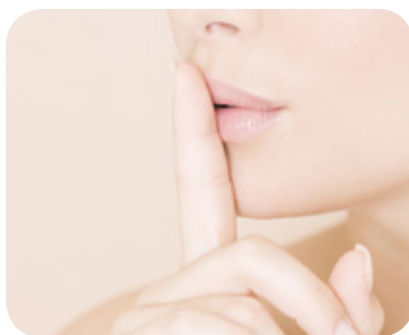

Silenciosas

Las turbinas Alegria le ofrecen la máxima calidad, sin vibraciones y un funcionamiento silencioso gracias a que han sido fabricados con la máxima precisión.



Filtro de agua reemplazable

Evita la penetración de partículas de suciedad en la turbina.



A la última

W&H es una empresa dinámica y en fuerte expansión. Le garantizamos el mejor asesoramiento y un servicio excepcional. La receta de nuestro éxito: tecnologías innovadoras, materiales de alta calidad, estrictos criterios de calidad y años de experiencia en el desarrollo de instrumentos de precisión dentales.



Su compañero perfecto

Esta combinación convierte a las turbinas de W&H en el compañero perfecto para trabajar con sus pacientes.



Gracias a la realidad aumentada (AR) de W&H, el mundo real se relaciona con el mundo virtual. Una experiencia única. ¡El futuro comienza hoy!

¡Disfrute Alegria en una nueva dimensión!

Descargue gratis la aplicación «W&H AR» desde Google Play (para Android) o Apple App Store en su smartphone o tablet PC. Abra la aplicación y sostenga el dispositivo a 50 cm de la pantalla.

Máxima eficiencia y seguridad durante el tratamiento

La gama de turbinas Alegra le ofrece la última tecnología para lograr los mejores resultados de preparación. Disfrute de la máxima eficiencia junto con la mayor seguridad: Para usted y sus pacientes.




Preparación rápida y precisa

Turbinas extremadamente potentes para el uso más eficiente.



Refrigeración precisa

El triple spray refrigera el lugar de tratamiento por todos lados y garantiza la seguridad durante el tratamiento.

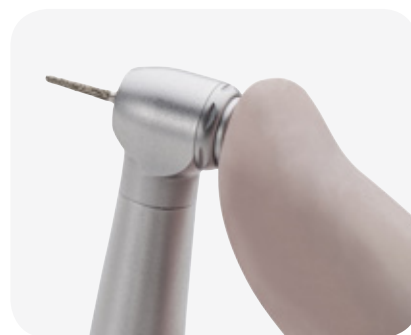

Fácil cambio de fresa

Equilibrio perfecto entre el fácil manejo del botón de presión y la mejor fuerza de agarre del sistema de sujeción. ¡Todo sin herramientas!



Turbinas hechas a medida

Desde lugares de difícil acceso hasta un rendimiento abrasivo elevado, disponemos del tamaño de cabezal adecuado para cada aplicación.



Sistema de cabezal higiénico patentado

Evita la aspiración de partículas de aerosol en la turbina en la desaceleración gradual del rotor.



Higiene y mantenimiento de sus turbinas



»Cuanto mejor es la atención, mayor es la satisfacción.«La limpieza y el mantenimiento periódico de sus turbinas protegen contra el desgaste prematuro y los costes innecesarios del servicio técnico.



Para cualquier ámbito de aplicación

W&H Service Oil F1 es el resultado de la investigación de W&H. Ha sido desarrollado unido a la moderna tecnología de accionamiento de W&H. Este aceite le da la seguridad de saber que está proporcionando a sus productos W&H la mejor lubricación posible.

Perfecto para la lubricación manual


W&H Service Oil F1 en spray limpia y lubrica sus turbinas y garantiza un funcionamiento perfecto.



Mantenimiento con tan solo pulsar un botón

Assistina 301 plus, Assistina 3x2, Assistina 3x3: La gama de unidades de mantenimiento de W&H le ofrece una lubricación óptima, así como una limpieza interna y externa automática para una perfecta preparación antes de la esterilización. ¡Y en tiempo récord!

Reducidos intervalos de mantenimiento – larga vida útil

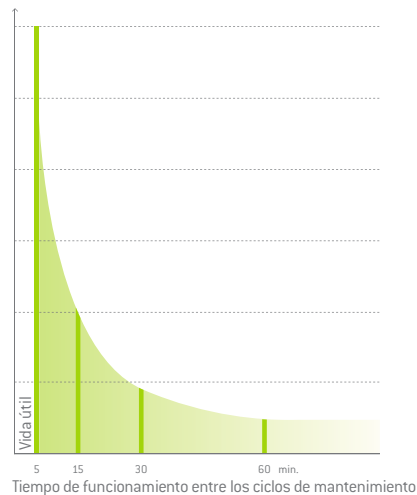

Visibilidad óptima y LED independiente

El integrar el generador de luz en el acoplamiento Roto Quick le ofrece la opción económica de una turbina LED dentro de la gama de turbinas Alegra.

Ventajas: Flexibilidad y una preparación higiénica.



Visibilidad óptima

La posición del LED en el cabezal de la turbina garantiza la mejor visibilidad e iluminación del lugar de tratamiento.



Turbina LED + acoplamiento con generador = luz independiente

Con la ayuda de un generador en el acoplamiento Roto Quick, es posible el uso de turbinas con luz en la manguera de la turbina sin suministro de corriente.



Máxima ergonomía

Una fácil rotación de 360° de la turbina en el acoplamiento, su reducido peso total y un diseño estilizado permiten el trabajo sin cansancio.

Otras ventajas

- > Válvula antiretorno integrada: Evita la absorción de partículas de aerosol en el tubo de spray
- > Cambio de componentes in situ por parte del usuario
- > Termodesinfectable
- > Esterilizable a 135 °C

Datos técnicos



Escanee el código QR con el teléfono móvil y obtenga más información sobre las turbinas Alegre

Fotografías orientativas. Los accesorios y complementos adicionales mostrados no se incluyen en el contenido suministrado.



Turbinas con LED	TE-97 LQ*	TE-98 LQ*	
Acoplamiento con generador	RQ-53 / RQ-54	RQ-53 / RQ-54	
Turbinas sin luz	TE-97 / TE-97 RM / TE-97 BC	TE-98 / TE-98 RM / TE-98 BC	TE-95 RM / TE-95 BC
Luz (versión LED):	LED y generador	LED y generador	–
Intensidad de iluminación (versión LED):	25.000 luxes	25.000 luxes	–
Tamaño del cabezal:	Ø 10,4 mm	Ø 12,2 mm	Ø 12,2 mm
Potencia:	14 W	16 W	16 W
Revoluciones:	390.000 min ⁻¹	330.000 min ⁻¹	330.000 min ⁻¹
Instrumentos rotatorios:	Fresa-FG, conforme a la normativa ISO 1797-1, con Ø 1,6 mm		
Diámetro máximo de la parte de fresado:	2 mm	2 mm	2 mm
Longitud máxima:	21 mm	25 mm	25 mm
Peso:			
> Turbinas con LED	46 g	48 g	
> Acoplamiento con generador	26 g / 20 g	26 g / 20 g	
> Turbinas sin luz	46 g / 47 g / 47 g	48 g / 50 g / 50 g	49 g / 49 g
Presión de funcionamiento:	2,2 – 2,8 bar (32 – 40 PSI)		
Rodamientos de bolas:	cerámico	cerámico	acero
Spray:	triple	triple	simple
Intensidad del sonido:	62 dB (A)		

Sus turbinas Alegre

Embalaje elegante y seguro.



* Las turbinas TE-97 LQ y TE-98 LQ con LED solo están diseñados para su uso con los acoplamientos Roto Quick RQ-53 y RQ-54 de W&H.

La potencia y las revoluciones de los accionamientos neumáticos dependen de la calidad de la manguera de la turbina utilizada y podrá variar por tanto de los valores indicados.

Fabricante:

W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH
Ignaz-Glaser-Straße 53, Postfach 1
5111 Bürmoos, Austria
t + 43 6274 6236-0
f + 43 6274 6236-55
office@wh.com
wh.com

Distribución:

W&H
Wehadent Ibérica S.L.
C/ Ciudad de Melilla, 3 Bajo
46017 Valencia, España
t + 34 96 353 20 20
f + 34 96 353 25 79
oficinas.es@wh.com
wh.com